

3M Placas Petrifilm^{MR} para el Recuento de Coliformes Totales

Tecnología para la reducción de su mano de obra calificada en el análisis general de calidad de producto y monitoreo ambiental.



Sea que elabore productos cárnicos, lácteos, avícolas o alimentos curados y procesados, usted sabe que las pruebas para la determinación de Coliformes son un proceso tradicional en el control de la calidad.

Las Placas Petrifilm^{MR} para Recuento de Coliformes (CC) hacen su labor rápida, confiable y eficientemente. En 24 horas, las Placas Petrifilm^{MR} para Recuento de Coliformes indican los niveles de higiene para materias primas, productos en proceso, productos terminados, ambiente de la fábrica y equipos.

A diferencia de otros métodos microbianos, las Placas Petrifilm^{MR} vienen ya listas para la muestra. Su exclusivo diseño, tiene una película cubierta con nutrientes y agentes gelificantes por lo que se pueden usar en cualquier momento.

A través del uso de Placas Petrifilm^{MR} usted ahorrará tiempo de su mano de obra calificada, para que tenga tiempo de monitorear frecuentemente los puntos críticos de control (PCC's). El resultado es un mejor control de proceso y alta calidad de producto.


3M Placas Petrifilm^{MR} para el Recuento de Coliformes Totales

Análisis rápidos y precisos. Solo se requieren 3 pasos:

1. Inocule 1 ml de la dilución de la muestra y espárzalo.
2. Incube a la temperatura apropiada.
3. Cuento las colonias.

Las Placas Petrifilm^{MR} son un método consistente de análisis y fácil de realizar, por lo que se reducen las oportunidades de error cuando se compara contra otros métodos.

La cuadrícula de fondo facilita el conteo de las colonias, entregando resultados rápidos precisos y consistentes. Las Placas Petrifilm^{MR} pueden leerse también en un contador de colonias tipo Québec u otro tipo lupa con luz.

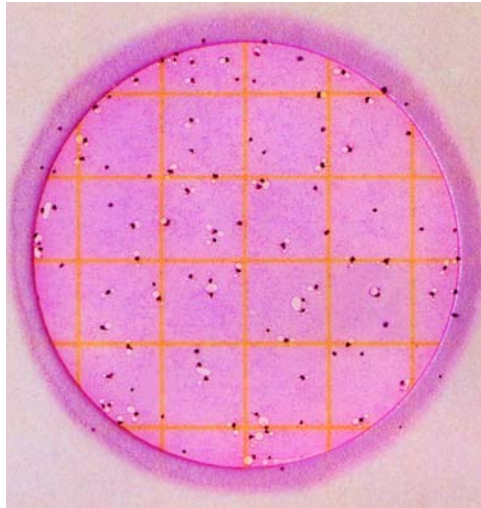

Use las Placas Petrifilm^{MR} CC para enumerar Coliformes en 24 horas. Un tinte indicador rojo provee un mejor contraste para facilitar el conteo de las colonias y la lamina superior atrapa el gas producido por los Coliformes en forma de burbujas. Las colonias confirmadas de Coliformes son rojas y se encuentran asociadas a burbujas de gas. Los no Coliformes se colorean de rojo pero no están asociadas a burbujas de gas.

Confiability en la que se puede contar 3M:

Cuando use productos 3M, usted obtiene un socio internacional que tiene recursos para brindarle soporte. Nuestros grupos de servicio al cliente y soporte técnico siempre están listos para asistirlo con sus preguntas y requerimientos.

Nuestra amplia gama de placas Petrifilm^{MR}, se fabrican en una planta certificada ISO 9002.

Los métodos de las Placas Petrifilm^{MR} han sido analizados colaborativamente y se encuentran incluidos dentro de los Métodos Oficiales de Análisis, publicados por la AOAC y, además otros organismos internacionales.

Existen otras Placas Petrifilm^{MR} para monitoreo de: Aerobios, Enterobacterias, Mohos y Levaduras, *E. coli* y *S. Aureus*

Información para ordenar:

Producto	Aplicación	# Catalogo	Contenido
Placas Petrifilm ^{MR} para Recuento de Coliformes Totales	Para enumeración de Coliformes	6410	50 placas
		6416	1000 placas

Comentarios Adicionales:

Llame al 1-651-733-7562 o al Representante de Ventas 3M más cercano a usted



3M Microbiology
3M center, Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1800-228-3957
microbiology@mmm.com
www.3M.com/microbiology

Petrifilm es una marca registrada de 3M
Impreso en:
Revisión: 2003-04
Referencia: 70-2009-0858-3

© 3M